


1 概覽



快速開始指南


- 1 概覽
- 2 迴路設置
- 3 設置畫面
- 4 處方設置

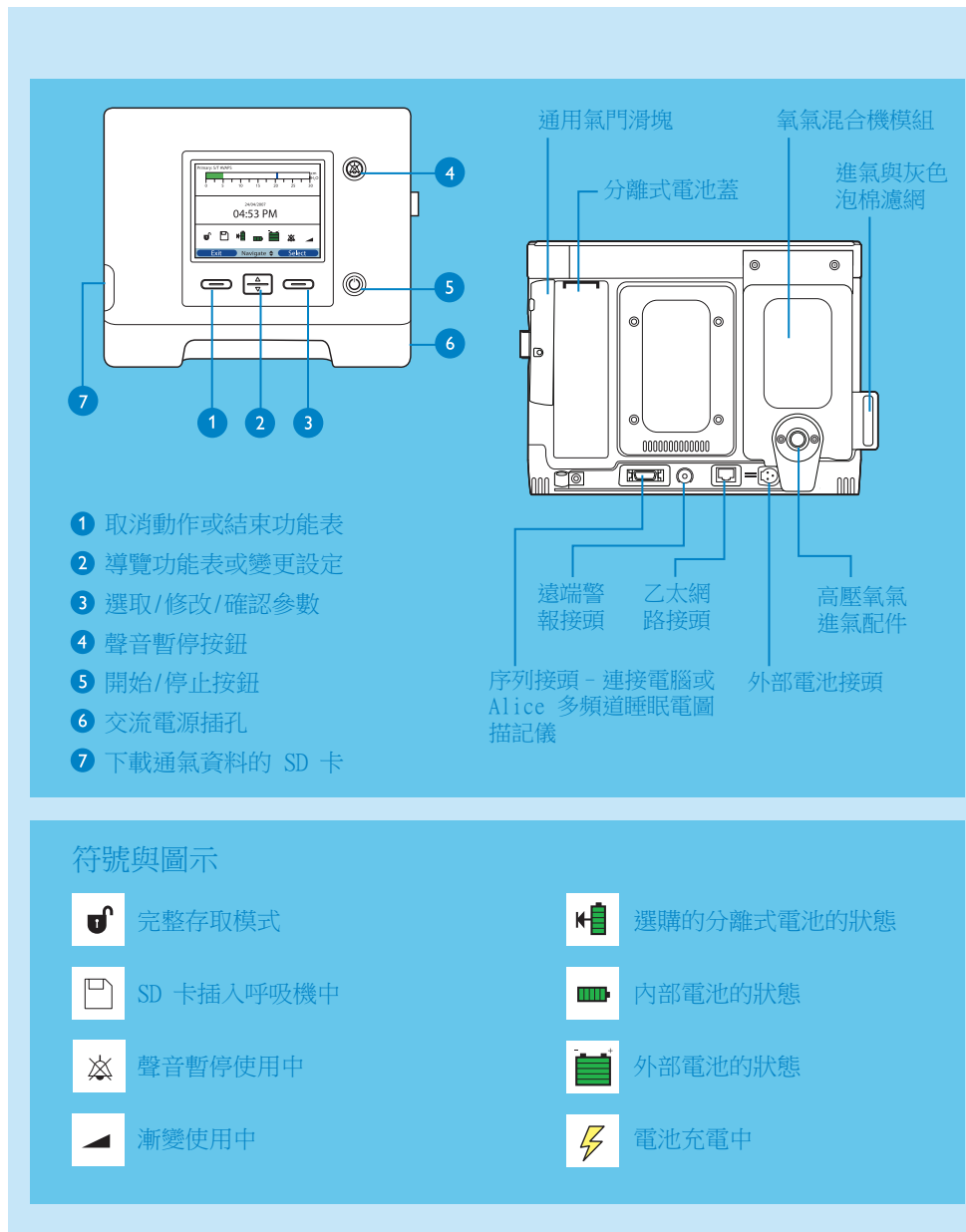

2 迴路設置


操作 Trilogy202 之前，您需要配置迴路類型。

被動式呼氣氣門迴路

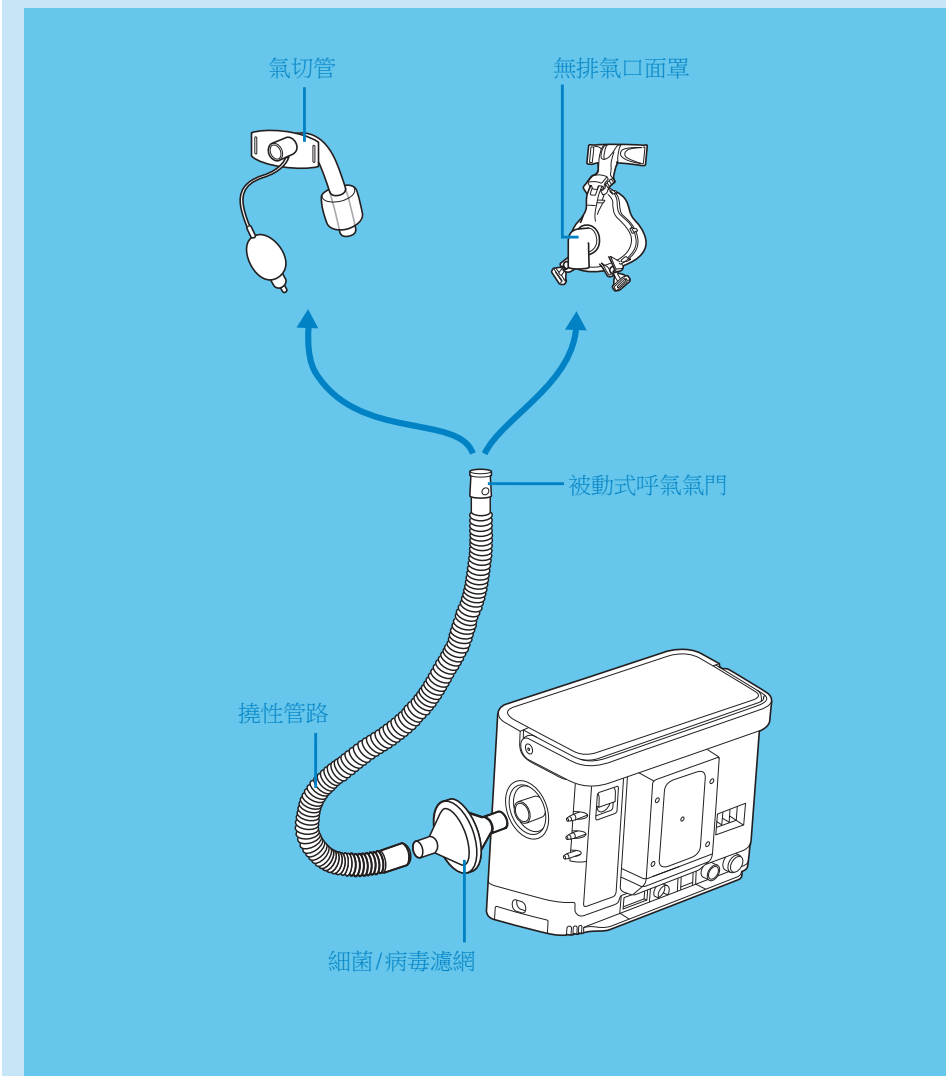


⚠ 從 Setup (設置) 畫面選取「Passive」(被動式) 迴路類型。

含近側氣道壓力迴路的主動式呼氣閥

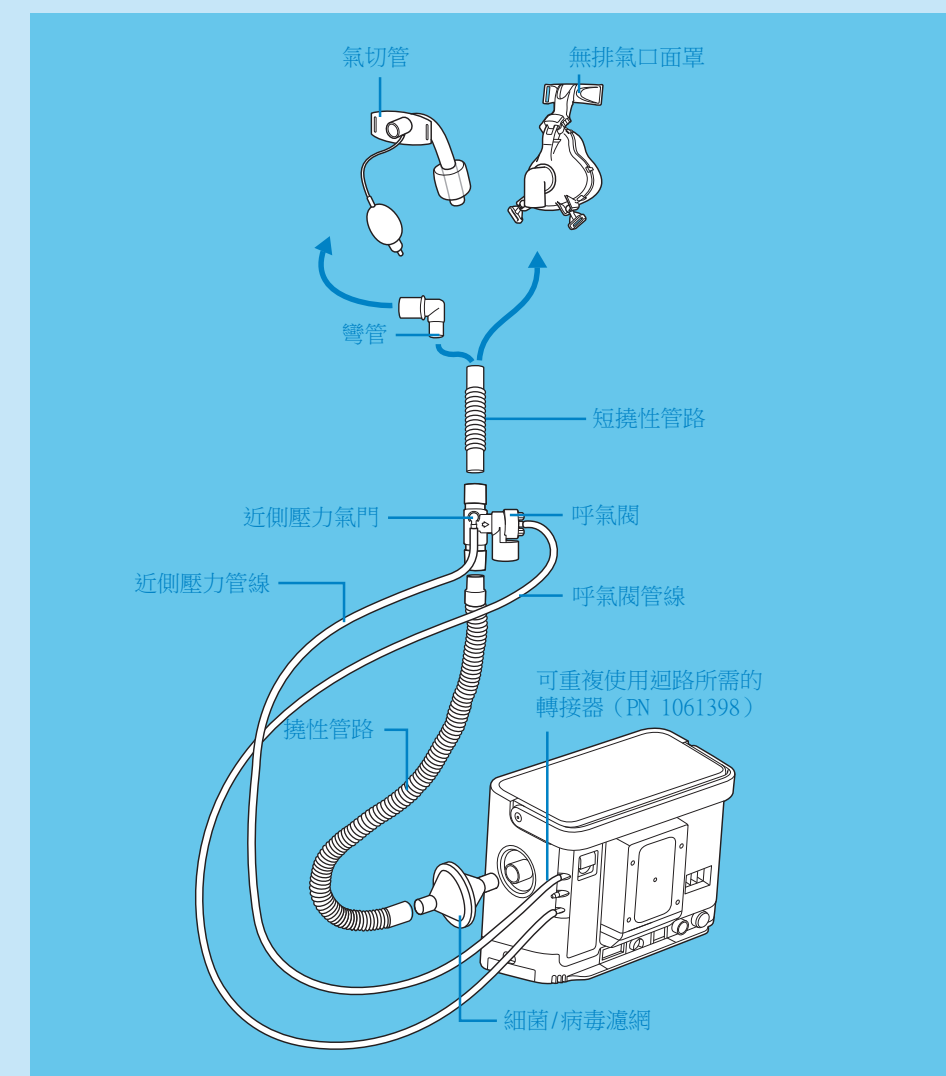

⚠ 從 Setup (設置) 畫面選取「Active PAP」(主動式 PAP) 迴路類型。

主動式呼氣閥氣流感應器迴路

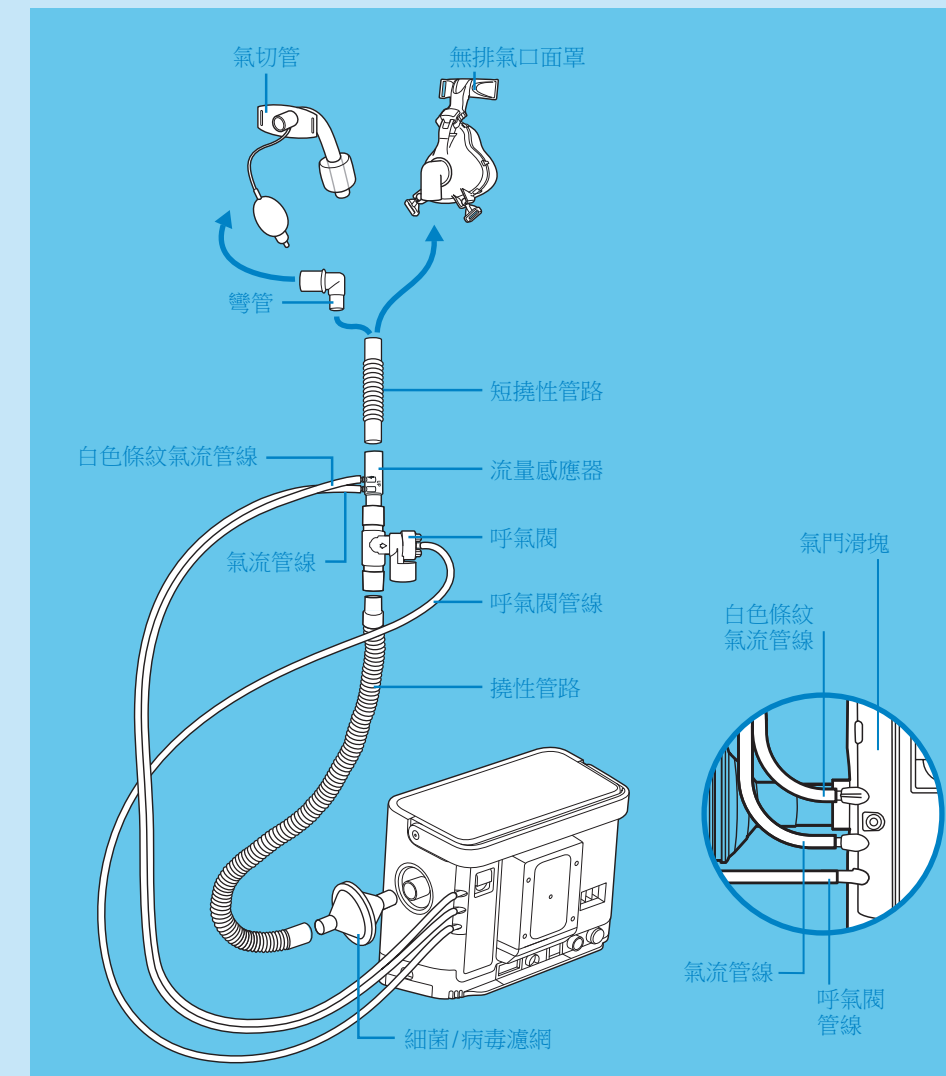


⚠ 從 Setup (設置) 畫面選取「Active flow」(主動式氣流) 迴路類型。


3 設置畫面

配置迴路類型（主動式或被動式）


確定關閉 Trilogy202 後才採取下列步驟

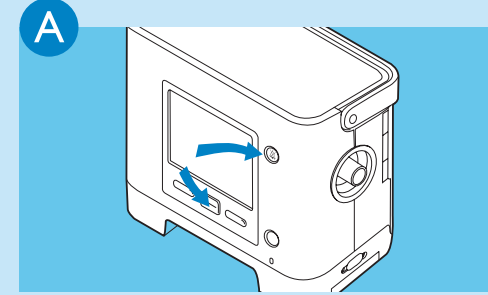


按住 和 幾秒鐘，以存取 **Setup**（設置）畫面

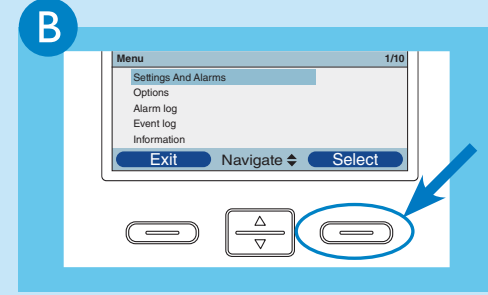

選取 **Settings And Alarms**（設定與警報）

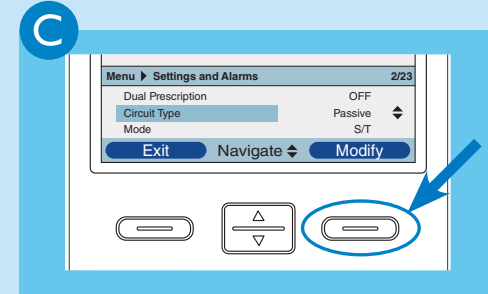


導覽至 **Circuit Type**（迴路類型），再按下 **Modify**（修改）

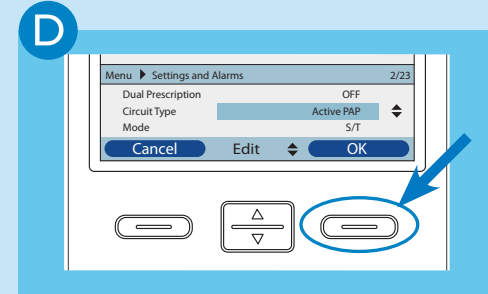


使用 以選擇 **Active PAP**（主動式 PAP）、**Active flow**（主動式氣流）、或 **Passive**（被動式），然後按兩次 **OK**（確定）以確認

設定功能表存取（可於在患者身上或取下時執行）


啟用完整存取設定

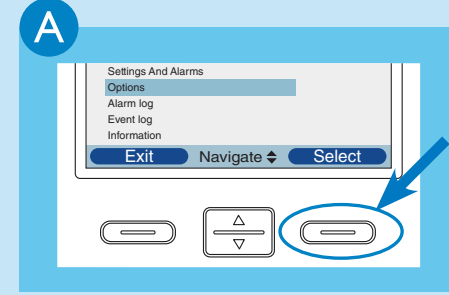


導覽至 **Options**（選項），再按下 **Select**（選取）

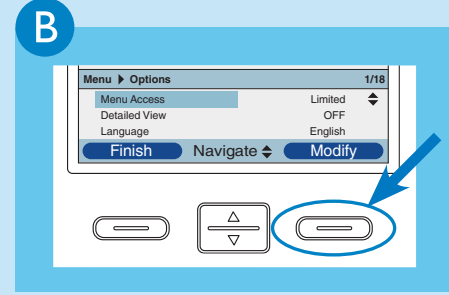


按下 **Modify**（修改）以進入 **Menu Access**（功能表存取）

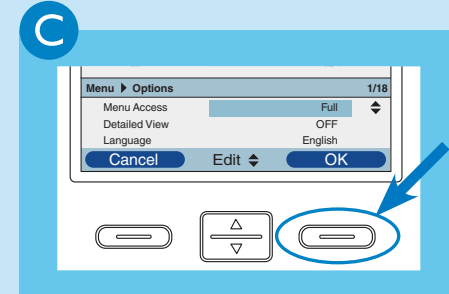

使用 以選擇 **Full**（完整）或 **Limited**（有限）存取，再按下 **OK**（確定）來確認

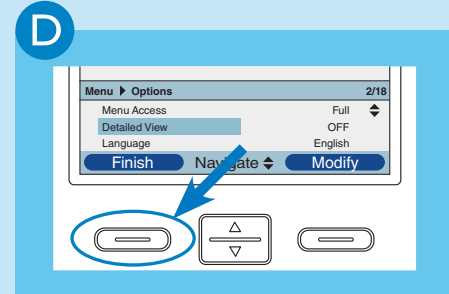


按下 **Finish**（完成）和 **Exit**（結束）以返回 **Initial Screen**（初始畫面）

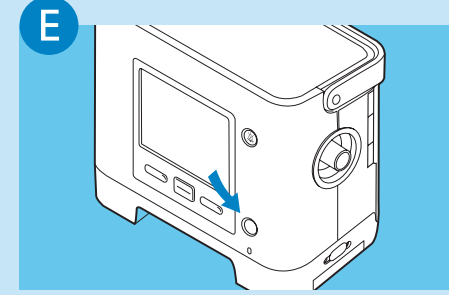


按下 以開始治療或繼續導覽功能表，以設置通氣參數


4 處方設置

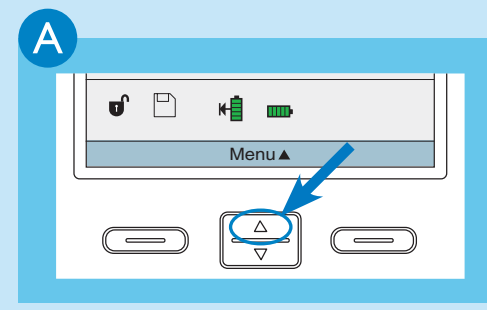


從主畫面按下 **Menu**（功能表）

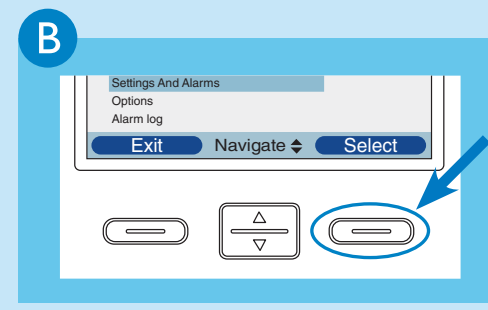


選取 **Settings And Alarms**（設定與警報）

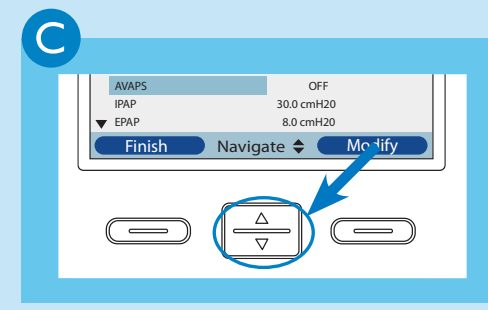


使用 往上和往下捲動以導覽設定與警報

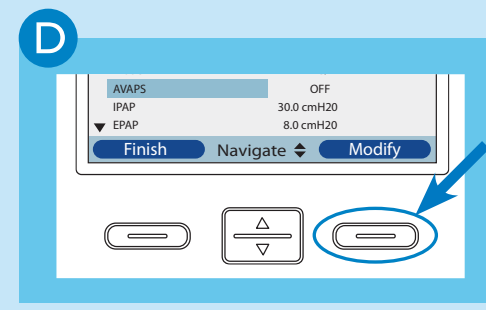


按下 **Modify**（修改）以變更藍色反白的參數

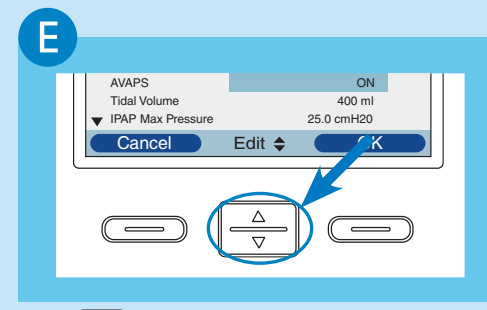

使用 以變更設定值或狀態

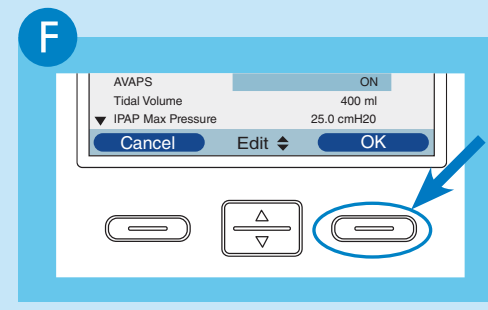


按下 **OK**（確定）以驗證新的設定

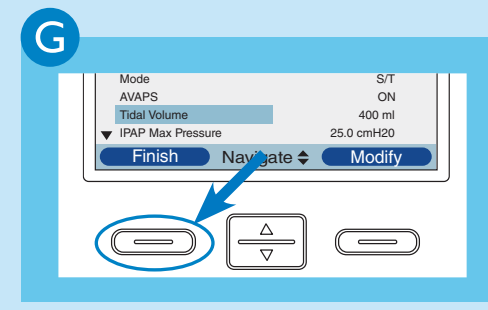


按下 **Finish**（完成）和 **Exit**（結束）以返回主畫面

Dual Prescription（雙處方）

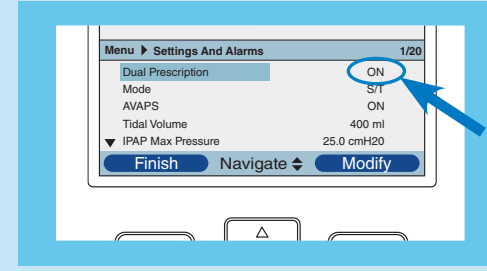

如果啟用 **Dual Prescription**（雙處方），需按前述說明調整兩種處方

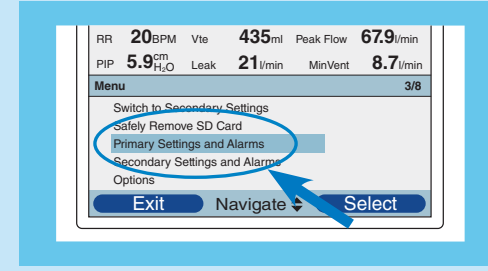

設定主要和次要處方